



Produkte 10/2022

Made in Germany

Herzlich willkommen in der Welt von audifon!

Wir entwickeln Hörsysteme von Akustikern für Akustiker und wissen:
Nur durch Ihre professionelle Dienstleistung beim Kunden und Ihre umfassenden Produktkenntnisse kann die Lebensqualität von Hörgeräteträgern verbessert werden. Auf diesem Weg wollen wir Sie begleiten.

Lernen Sie unsere Philosophie und unser Unternehmen kennen, entdecken Sie unser breites Produktportfolio an modernen Hörsystemen „Made in Germany“ und verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Software-Lösungen und Zubehörangebote.

Gerne können Sie sich selbst ein Bild von uns machen – jederzeit auch ganz persönlich.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr audifon Team

INHALT

UNTERNEHMEN	audifon hearing systems und Produktphilosophie
HÖRSYSTEME	Wings Plattform inkl. audifon App & multistreamer pro Cosma Plattformen CROS/BiCROS/TRT und Optionen
SOFTWARE SOLUTIONS	audifit 5 und MySound!
ZUBEHÖR	Streaming und Sound sowie Batterien und Pflege

•• DAS UNTERNEHMEN



DAS UNTERNEHMEN

•• audifon hearing systems

Wir entwickeln Lebensqualität

Wir entwickeln nicht einfach nur Hörsysteme. Vielen Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen wir durch unsere Produkte, besser zu hören und wieder am Leben teilzunehmen. Doch selbst die besten Hörsysteme werden erst durch Ihre Dienstleistung und die Anpassung beim Kunden zu dessen individueller Hörlösung. Als Partner der Akustiker arbeiten wir permanent an der Weiterentwicklung unserer Hörsysteme – mit Leidenschaft, Präzision und Know-How. Damit Sie Ihren Kunden die bestmögliche Versorgung bieten und ihre Lebensqualität zurückgeben können.

Wir verstehen den Markt und Ihre Bedürfnisse

Als Unternehmen der KIND Hörgeräte Gruppe, des größten Familienunternehmens in der Hörakustik in Deutschland, sind wir mit den täglichen Herausforderungen des Akustikers vertraut. Wir kennen den gesamten Markt und verstehen die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Dieses umfangreiche Wissen fließt in die Forschung und Entwicklung neuer audifon Hörsysteme ein.



DAS UNTERNEHMEN

●● Produktphilosophie

Wir bauen auf „Made in Germany“

Wir entwickeln und produzieren zu 100% am Qualitätsstandort Deutschland. Von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienproduktion – hier ist deutsche Ingenieurskunst am Werk. Mit unseren Hörsystemen decken wir ein breites Spektrum der modernen Hörakustik ab und werden den Ansprüchen an Design, Features und audiologische Leistung gerecht. Damit Sie immer eine optimale Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Kunden zur Hand haben.



Wir sind weltweit

In über 65 Ländern vertrauen Geschäftspartner auf unsere Produkte und unsere jahrzehntelange Erfahrung. Niederlassungen unter anderem in Asien, Tschechien, Afrika und Südamerika ermöglichen uns den direkten Kontakt zu unseren Partnern. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne direkt an uns.





••
HÖRSYSTEME
WINGS PLATTFORM

•• Der neue wireless Chip



Die Wireless-Technologie beeinflusst unser tägliches Leben immer mehr. Wireless-Geräte gehören heute zu unserem Alltag. Auch bei Hörsystemen findet diese Entwicklung statt, die eine Verbindung mit dem Smartphone und anderen Geräten ermöglicht. Wir möchten Ihnen daher diese bewährte Technologie und ihre Vorteile vorstellen.



Im Wings Chip ist die Wireless-Technologie voll integriert. Er nutzt Bluetooth sowie die 2,4 GHz Frequenz, kombiniert mit vielen zukunftsweisenden und bewährten audiologischen Funktionen.

•• Wireless-Funktionen



Wireless Streaming

Das Streamen von Medien sowie der Empfang von Anrufen direkt auf das Wings-Hörsystem ist mit einem iPhone einfacher denn je. Mittels der audifon-App ist der Mikrofoneingang des Hörsystems frei einstellbar, um Hintergrundgeräusche soweit zu reduzieren, dass die Klangqualität der Medienquelle für den Nutzer optimal ist.



Binaurale Synchronisation

Die Scene Detect-Funktion erkennt automatisch verschiedene Klangsituationen und synchronisiert die Einstellungen binaural, um einen optimalen Hörkomfort zu erzielen. Diese Anpassungen am audifon-Hörsystem erfolgen adaptiv und automatisch ohne Zutun des Nutzers.

Für folgende Einstellungen kann die binaurale Synchronisation genutzt werden:

- Erkennung unterschiedlicher Klangsituationen
- Mikrofondirektionalität
- TRT-Modul mit verschiedenen Einstellungen



easyclick

Steuerungs-Einstellungen wie Lautstärke und Speicherprogramme werden von beiden Hörsystemen drahtlos gemeinsam genutzt. Mit easyclick werden die Einstellungen, die an dem einen Hörsystem vorgenommen werden, automatisch an die andere Seite übertragen.



Wireless Programmierung

Dank der Programmierung mittels NOAHlink Wireless ist die Anpassung der audifon-Hörsysteme einfach und komfortabel. Nutzer werden die kabellose-Freiheit bei jeder Feinabstimmung zu schätzen wissen.

HÖRSYSTEME Wings Plattform

•• Wireless-RITE mit Wings Chip-Technologie

•• Übersicht risa R / lewi R



Anpassoptionen



UniTip Domes



UniTip Soundshell


Farboptionen




graphit arabica champagner black bronze anthrazit nougat silbergrau beige




	R Hörereinheit S	R Hörereinheit M	R Hörereinheit P
Bauform	RITE	RITE	RITE
Ohrankopplung			
OpenFit	■	■	■
Technische Daten			
WDRC-Kanäle risa/lewi	12/16	12/16	12/16
Batteriegröße	312	312	312
Batterielebensdauer ohne/ mit wireless ¹	100 h/70 h	90 h/65 h	80 h/60 h
Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	45 dB/111 dB	56 dB/117 dB	67 dB/122 dB
Frequenzbereich in Hz	100 Hz-9400 Hz	100 Hz-9100 Hz	100 Hz-7700 Hz
Ausstattung			
Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●
Lautstärkeregl.	Rocker Switch	Rocker Switch	Rocker Switch
Programmschalter	Rocker Switch	Rocker Switch	Rocker Switch
Telefonspule			
Tinnitus-Modul ²	●	●	●
Direct Audio Input (DAI)			
Batteriefachverriegelung			
Anpassbereich			

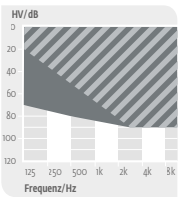

Der schraffierte Bereich gilt für das RITE mit offenem Dome.

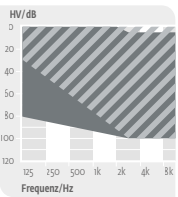

Der schraffierte Bereich gilt für das RITE mit offenem Dome.

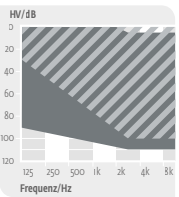

Der schraffierte Bereich gilt für das RITE mit offenem Dome.

● Standard
○ Optional
1 bei 2h täglicher Nutzung der Streaming-Funktionalitäten
2 nur wenn das Tinnitus-Modul in audifit aktiviert ist

Messdaten nach EN 60118-0:2015 (2 cm³-Koppler) & ANSI S3.22-2014 (2 cm³-Koppler)

HÖRSYSTEME Wings Plattform

- Das neue wireless HdO mit Wings Chip-Technologie und bewährter Benutzerfreundlichkeit




Anpassoptionen



Ear molds UniTip ThinTube UniTip Soundshell

Farboptionen

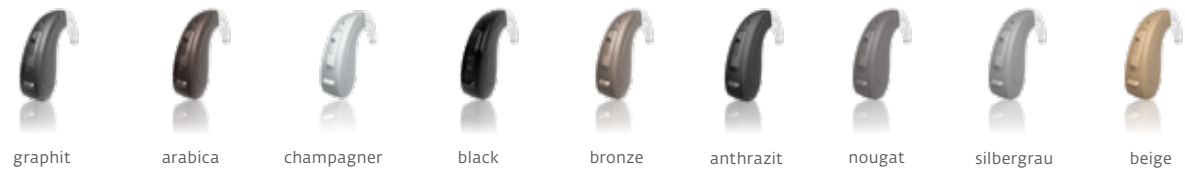


graphit arabica champagner black bronze anthrazit nougat silbergrau beige


- Übersicht risa S / lewi S



	risa S	lewi S
Bauform	HdO	HdO
Ohrankopplung		
OpenFit	UniTip ThinTube	UniTip ThinTube
Technische Daten		
WDRC-Kanäle	12	16
Batteriegröße	13	13
Batterielebensdauer ohne/ mit wireless ¹	150 h/100 h	150 h/100 h
Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	67 dB/131 dB	67 dB/131 dB
Frequenzbereich in Hz	100 Hz-6700 Hz	100 Hz-6700 Hz
Ausstattung		
Wasserabweisende Beschichtung	●	●
Lautstärkестeller	Rocker Switch	Rocker Switch
Programmschalter	Rocker Switch	Rocker Switch
Telefonspule		
Tinnitus-Module ²	●	●
Direct Audio Input (DAI)		
Batteriefachverriegelung		
Fitting Range		

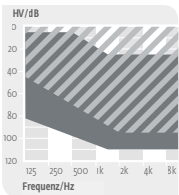

Der schraffierte Bereich gilt für das risa S mit offenem Dome.

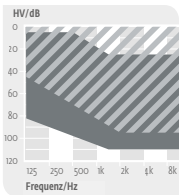

Der schraffierte Bereich gilt für das lewi S mit offenem Dome.

● Standard
○ Optional
¹ bei 2h täglicher Nutzung der Streaming-Funktionalitäten
² nur wenn das Tinnitus-Modul in audifit aktiviert ist

Messdaten nach EN 60118-0:2015 (2 cm³-Koppler) & ANSI S3.22-2014 (2 cm³-Koppler)

•• audifon App

Die audifon App erleichtert das tägliche Leben. Einfach zu bedienen, höchster Hörkomfort

Die audifon App bietet eine Vielzahl nützlicher Funktionen, die die Anforderungen des täglichen Lebens erleichtern. Sie wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Nutzern und unserem Team aus professionellen Hörakustikern entwickelt. Die App hilft dem Kunden, die Hörsysteme optimal anzupassen, damit die Hörsysteme jeden Tag gern getragen werden. Die audifon App ist mit allen auf der Wings-Plattform basierenden Hörsystemen kompatibel!

Fernsteuerung über das Smartphone

Mit der audifon App können Nutzer ihre Hörsysteme ganz einfach über ihr Android- oder iOS-Smartphone an ihre Bedürfnisse sowie die Umgebung anpassen. Stellen Sie die Lautstärke ein oder schalten die Geräte stumm, wechseln Sie zwischen den Programmen oder passen Sie diese mit Hilfe der Filter- und Klangeinstellungen für bestimmte Hörsituationen an.

Streaming-Funktion vom Smartphone verfügbar

Nutzer können jetzt einen Smartphone-Anruf entgegennehmen und sich das gesamte Gespräch oder auch Musik direkt auf das audifon-Hörsystem streamen lassen. Das Smartphone kann auch als ferngesteuertes Mikrofon verwendet werden.

Klangeinstellung für das Hörgerätesystem

Sollten die ursprünglichen Einstellungen für eine bestimmte Hörsituation nicht optimal sein, ermöglicht die audifon App dem Nutzer eine Feinabstimmung des Klangs sowie anderer nützlicher Funktionen durch einfaches Anpassen der Filter.


Die audifon App bietet dem Nutzer die Freiheit, niedrige, mittlere und hohe Frequenzen einzustellen, um sowohl die Einstellung für eine bessere Sprachverständlichkeit zu personalisieren als auch, um die Lieblingsmusik zu hören.

Individuelle Einstellungen als Favoriten speichern

Benutzer können mehrere Speichereinstellungen erstellen, jede mit einem bestimmten Ort verknüpfen und diese als Favoriten speichern. Die audifon App aktiviert automatisch eine jener zuvor gespeicherten Einstellungen, wenn sie an diesen Ort zurückkehren, da das Smartphone GPS- und Wifi-Netzwerke zur Erkennung des Geodaten-Tags verwendet.

Einfacher Download in Ihrem App Store

Laden Sie die audifon App ganz bequem aus dem App Store auf Ihr Smartphone herunter.

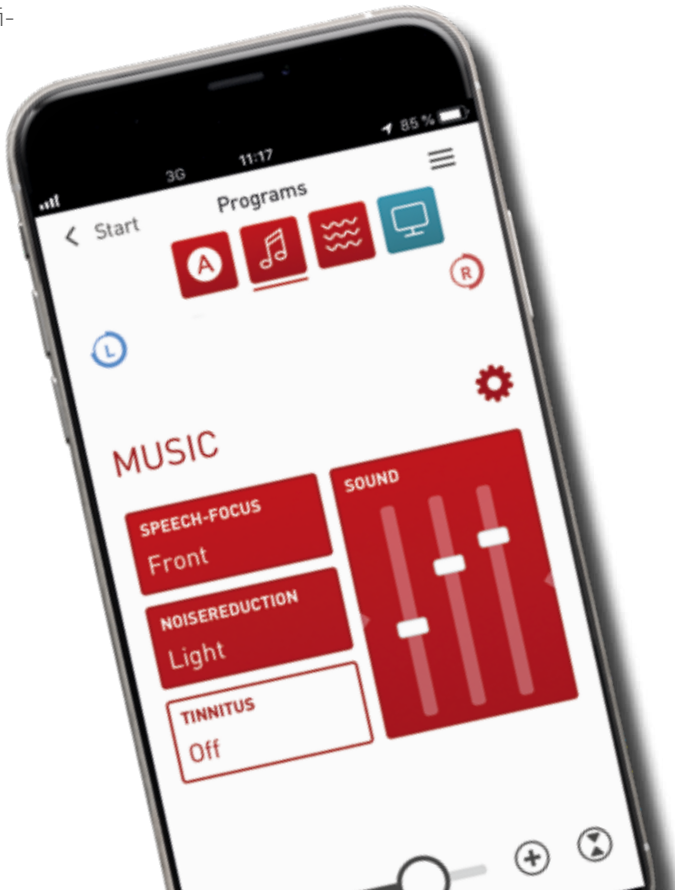

AUDIFON APP

●● multistreamer pro

Telefon-Streaming

Verknüpfen Sie für Freisprech-Anrufe ein beliebiges Smartphone mit Ihren Wings Hörsystemen.
Direktes Streaming ist für das iPhone verfügbar.

Live-Mikrofon

Positionieren Sie den multistreamer pro in einer lauten Umgebung als Mikrofon in der Nähe des Sprechers und genießen Sie entspannten Hörgenuss. Die maximale Reichweite beträgt bis zu 10 Meter.

TV & Sound Streaming

Verwenden Sie die 3,5-mm-Klinkenkabel, um ein Ende mit dem TV und das andere mit dem multistreamer pro zu verbinden, um Audio direkt auf Ihr Wings-Hörsystem zu streamen.

Holen Sie mit diesem perfekt abgestimmten Zubehör noch mehr aus Ihren audifon Wings heraus: Mit dem audifon multistreamer pro können Sie den TV-Ton direkt auf Ihre Hörsysteme übertragen.

Entwickelt für Menschen, die perfekten Klang schätzen:

- kristallklare TV-Tonqualität
- Streaming von Musik und Hörbüchern auf Ihre Hörsysteme
- einfaches Verstehen von weiter entfernten Gesprächspartnern
- freihändiges Telefonieren



MULTISTREAMER
PRO



● ●
HÖRSYSTEME
COSMA PLATTFORM

Übersicht rega

	P	S	XS	R Hörereinheit S	R Hörereinheit M		pico	CIC	ITE								
Bauform	Power HdO	HdO	mini HdO	RITE	RITE	Bauform	mini CIC	CIC	Kanal								
Ohrankopplung									V50	V60							
OpenFit	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	■	■				V70								
Technische Daten						Technische Daten											
WDRC-Kanäle	18	18	18	18	18	WDRC - Kanäle	18	18	18	18							
Batteriegröße	13	312	10	312	312	Batteriegröße	10	10	312/13	312/13							
Batterielebensdauer (Zink/Luft)	140 h	100 h	60 h	110 h	110 h	Batterielebensdauer (Zink/Luft)	60 h	60 h	110/180 h	110/170 h							
Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	71/137*	66/132	61/127	45/111	55/117	Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	41/110	50/110	50/112	61/115							
Frequenzbereich in Hz	100 – 6800	100 – 8000	100 – 9800	100 – 9500	100 – 9500	Frequenzbereich in Hz	100 – 9400	100 – 8800	100 – 8800	100 – 9400							
Ausstattung						Ausstattung											
Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●	●	Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●							
Lautstärkesteller	Rocker Switch	Rocker Switch		Rocker Switch	Rocker Switch	Lautstärkesteller		○*	○	○							
Programmschalter	Rocker Switch	Rocker Switch	●	Rocker Switch	Rocker Switch	Programmschalter		○*	●	●							
Telefonspule	●	●	●	●	●	Telefonspule			○	○							
Tinnitus-Modul	●	●	●**	●	●	Tinnitus-Modul		●	●	●							
Direkter Audioeingang (DAI)	●	●				Windschutz		○	○	○							
Batteriefachverriegelung	●	●	●														
Farben	Anpassbereich					Anpassbereich											
unlackiert	beige																
	silbergrau																
lackiert	anthrazit																
	nougat																
	graphit (Standard)																
	bronze																
	arabica	Der schraffierte Bereich gilt für das P-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.				Der schraffierte Bereich gilt für das S-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.				Der schraffierte Bereich gilt für das XS-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.							
	champagner	Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit S mit geschlossenem Dome.				Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit M mit geschlossenem Dome.											
	black																
● Standard ○ Optional * WHO-4 geeignet. **Keine Kostenübernahme durch Kostenträger in Deutschland. Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten.																	

Übersicht kami

	P	S	XS	R Hörereinheit S	R Hörereinheit M		CIC	ITE		
Bauform	Power HdO	HdO	mini HdO	RITE	RITE	Bauform	CIC	Kanal		
Ohrankopplung										
OpenFit	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	■	■			V50	V60	V70
Technische Daten						Technische Daten				
WDRC-Kanäle	12	12	12	12	12	WDRC-Kanäle	12	12	12	12
Batteriegröße	13	312	10	312	312	Batteriegröße	10	312/13	312/13	312/13
Batterielebensdauer (Zink/Luft)	140 h	100 h	60 h	110 h	90 h	Batterielebensdauer (Zink/Luft)	60 h	110/180 h	110/170 h	90/140 h
Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	71/137*	66/132	61/127	45/111	55/117	Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	50/110	50/112	61/115	70/131
Frequenzbereich in Hz	100 – 6800	100 – 8000	100 – 9800	100 – 9500	100 – 9500	Frequenzbereich in Hz	100 – 8800	100 – 8800	100 – 9400	100 – 6500
Ausstattung						Ausstattung				
Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●	●	Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●
Lautstärkesteller	Rocker Switch	Rocker Switch		Rocker Switch	Rocker Switch	Lautstärkesteller	○*	○	○	○
Programmschalter	Rocker Switch	Rocker Switch	●	Rocker Switch	Rocker Switch	Programmschalter	○*	●	●	●
Telefonspule	●	●	●	●	●	Telefonspule		○	○	○
Tinnitus-Modul	●	●	●**	●	●	Tinnitus-Modul	●	●	●	●
Direkter Audioeingang (DAI)	●	●				Windschutz	○	○	○	○
Batteriefachverriegelung	●	●	●							
Farben	Anpassbereich					Anpassbereich				
unlackiert ■ beige ■ silbergrau ■ anthrazit (Standard) ■ nougat lackiert ■ graphit ■ bronze ■ arabica ■ champagner ■ black	Der schraffierte Bereich gilt für das P-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.	Der schraffierte Bereich gilt für das S-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.	Der schraffierte Bereich gilt für das XS-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.	Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit S mit geschlossenem Dome.	Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit M mit geschlossenem Dome.					
● Standard ○ Optional * WHO-4 geeignet ** Keine Kostenübernahme durch Kostenträger in Deutschland. Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten. ● Standard ○ Optional * Bei CIC Lautstärkesteller oder Taster möglich. Die Gerätegröße von IdO-Hörsystemen ist abhängig von den gewählten Ausstattungsoptionen. Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten.										


Übersicht sino



	P	S	XS	R Hörereinheit S	R Hörereinheit M		CIC	ITE		
Bauform	Power HdO	HdO	mini HdO	RITE	RITE	Bauform	CIC	Kanal		
Ohrankopplung										
OpenFit	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	■	■			V50	V60	V70
Technische Daten						Technische Daten				
WDRC-Kanäle	9	9	9	9	9	WDRC-Kanäle	9	9	9	9
Batteriegröße	13	312	10	312	312	Batteriegröße	10	312/13	312/13	312/13
Batterielebensdauer (Zink/Luft)	140 h	100 h	60 h	110 h	90 h	Batterielebensdauer (Zink/Luft)	60 h	110/180 h	110/170 h	90/140 h
Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	71/137**	66/132	61/127	45/111	55/117	Spitzenwerte V _{max} /OSPL _{max} in dB	50/110	50/112	61/115	70/131
Frequenzbereich in Hz	100 – 6800	100 – 8000	100 – 9800	100 – 9500	100 – 9500	Frequenzbereich in Hz	100 – 8800	100 – 8800	100 – 9400	100 – 6500
Ausstattung						Ausstattung				
Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●	●	Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●
Lautstärkестeller	Rocker Switch	Rocker Switch		Rocker Switch	Rocker Switch	Lautstärkестeller	○*	○	○	○
Programmschalter	Rocker Switch	Rocker Switch	●	Rocker Switch	Rocker Switch	Programmschalter	○*	●	●	●
Telefonspule	●	●	●	●	●	Telefonspule		○	○	○
Tinnitus-Modul	●	●	●**	●	●	Tinnitus-Modul	●	●	●	●
Direkter Audioeingang (DAI)	●	●				Windschutz	○	○	○	○
Batteriefachverriegelung	●	●	●							
Farben	Anpassbereich					Anpassbereich				
unlackiert beige silbergrau anthrazit (Standard) nougat										
	Der schraffierte Bereich gilt für das P-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.	Der schraffierte Bereich gilt für das S-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.	Der schraffierte Bereich gilt für das XS-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option.	Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit S mit geschlossenem Dome.	Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit M mit geschlossenem Dome.					

● Standard
○ Optional
* WHO-4 geeignet
**Keine Kostenübernahme durch Kostenträger in Deutschland.
Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten.

● Standard
○ Optional
* Bei CIC Lautstärkестeller oder Taster möglich.
Die Gerätegröße von IdO-Hörsystemen ist abhängig von den gewählten Ausstattungsoptionen.
Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten.

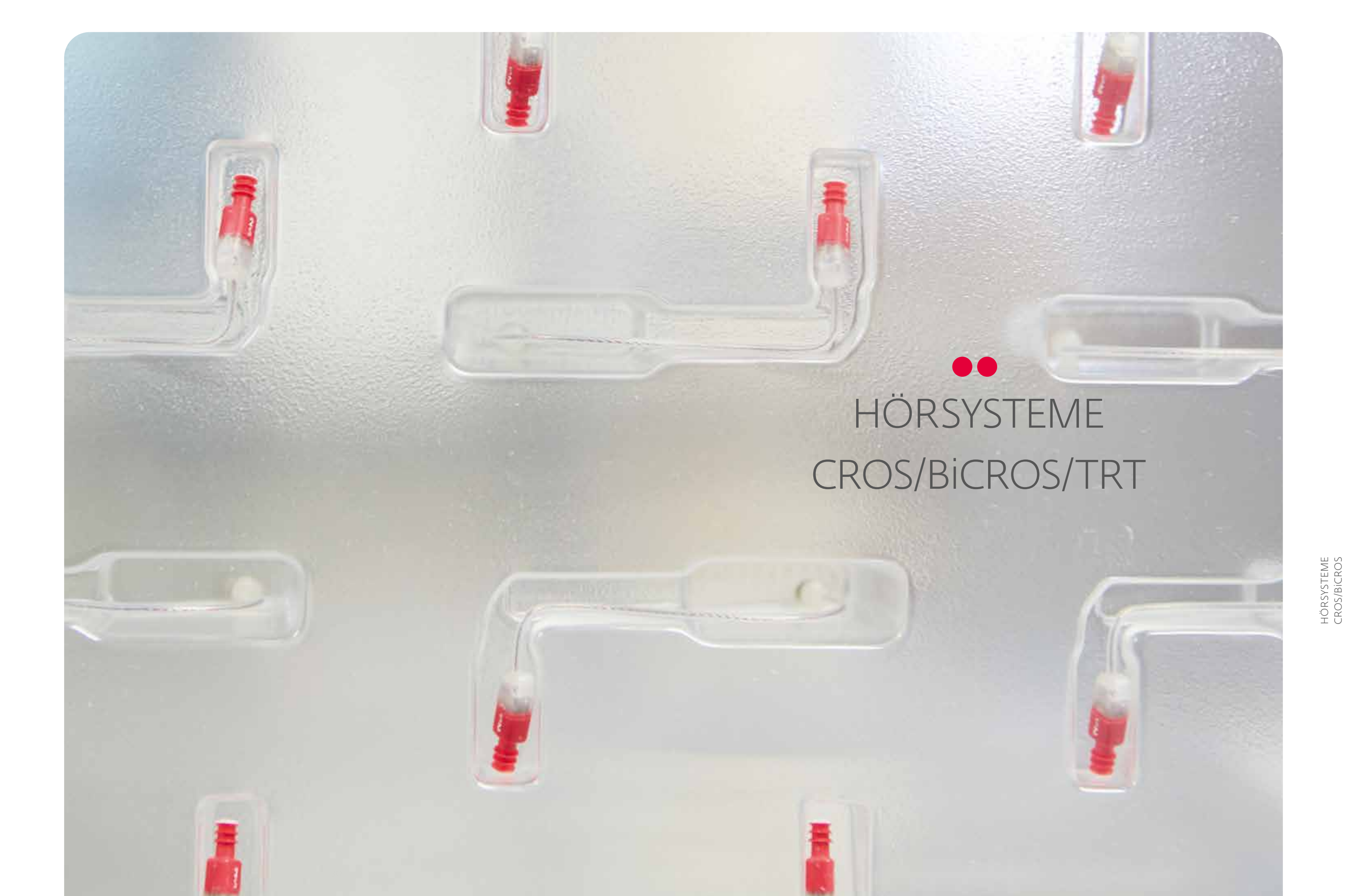


● ●

HÖRSYSTEME

CROS/BiCROS/TRT

•• CROS/BiCROS

audifon via pro überträgt Audiosignale kabellos in Echtzeit von der Sender-Einheit am schlechteren oder unversorgbaren Ohr auf die Empfänger-Einheit am besseren Ohr. Dank der hochentwickelten digitalen Übertragungstechnik mit hoher Bandbreite kann eine störungsfreie Echtzeit-Audioübertragung realisiert werden.

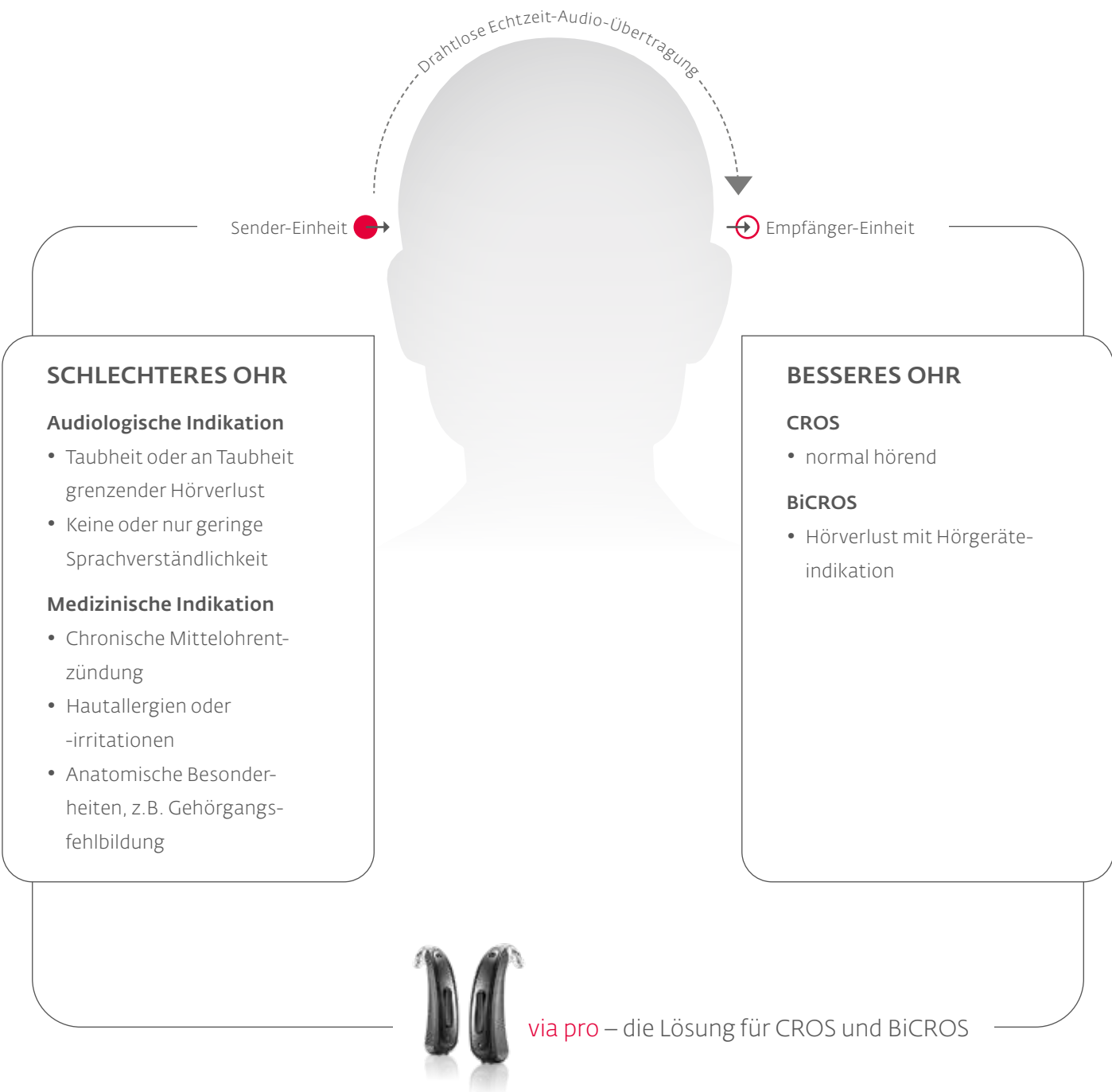


•• Übersicht via pro



	P	S+	R Hörereinheit S	R Hörereinheit M	IS	IS+
Bauform	Power HdO	HdO	RITE	RITE	Kanal	Concha
Ohrankopplung						
OpenFit	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube	Easy Thin Tube			
Technische Daten						
Batteriegröße	13	312	312	312	312	13
Batterielebensdauer (Zink/Luft)	270h/70h*	170h/40h*	170h/50h*	170h/40h*	130h/40h*	260h/80h*
Spitzenwerte $V_{max}/OSPL_{max}$ in dB	72/136	66/131	45/110	55/117	58/117	62/117
Frequenzbereich in Hz	100–6100	200–5900	100–7700	100–8000	100–8000	100–8000
Übertragung						
Technologie	Digitales NFMI	Digitales NFMI	Digitales NFMI	Digitales NFMI	Digitales NFMI	Digitales NFMI
Frequenz	10,6 MHz	10,6 MHz	10,6 MHz	10,6 MHz	10,6 MHz	10,6 MHz
Reichweite	18 – 22 cm	18 – 22 cm	18 – 22 cm	18 – 22 cm	18 – 22 cm	18 – 22 cm
Feldstärke	-35 dB μ A/m bei 10 m	-35 dB μ A/m bei 10 m	-35 dB μ A/m bei 10 m	-35 dB μ A/m bei 10 m	-35 dB μ A/m bei 10 m	-35 dB μ A/m bei 10 m
Ausstattung						
Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●	●		
Lautstärksteller	Rocker Switch	Rocker Switch	Rocker Switch	Rocker Switch	○	●
Programmumschalter	Rocker Switch	Rocker Switch	Rocker Switch	Rocker Switch	●	●
Telefonspule	●	●	●	●	○	○
Batteriefachverriegelung	●	●				

Anpassbereich

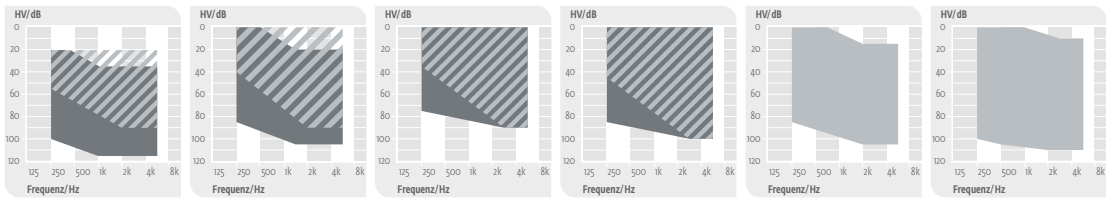

Der schraffierte Bereich gilt für das P-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option. Der schraffierte Bereich gilt für das S+-Gehäuse mit Easy Thin Tube Option. Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit S mit geschlossenem Dome. Der dunkle Bereich gilt für die Hörereinheit M mit geschlossenem Dome.

● Standard
○ Optional
* Übertragungsmodul passiv/Übertragungsmodul aktiv.
Die Gerätegröße von IdO-Hörsystemen ist abhängig von den gewählten Ausstattungsoptionen.
Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten.

•• TRT-Solutions



Neben unseren Hörsystemen, die mit einem Tinnitus-Modul ausgestattet sind, haben wir mit der sueno-Familie auch reine Rauscher im Programm. Diese ermöglichen eine optimale Anpassung an individuelle Kundenanforderungen im Rahmen einer Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT). Diese Form der Gewöhnungstherapie (Habituation) wurde speziell entwickelt, um Menschen den Umgang mit einem chronischen Tinnitusleiden zu erleichtern.

Die TRT-Therapie bedient sich verschiedener Counselling-Techniken, um die Tinnituswahrnehmung in den Hintergrund zu stellen und das gestörte auditorische System zu korrigieren. Tinnitus-Retraining-Instrumente werden zur Unterstützung der Therapie eingesetzt und erzeugen ein Hintergrundrauschen, um Ablenkung vom Tinnitus zu bieten.

•• Übersicht sueno pro



	sueno pro S	sueno pro R	sueno pro ITE
Bauform	HdO	RITE	IdO
Ohrankopplung			
OpenFit	Easy ThinTube	■	Open Canal
Technische Daten			
Batteriegröße	312	312	10/312
Batterielebensdauer (Zink/Luft)	120 h	130 h	100 h/140 h
OSPL _{max} in dB	69	70	70
Frequenzbereich in Hz	100-8000	100 – 8000	100 – 8000
Ausstattung			
Wasserabweisende Beschichtung	●	●	●
Lautstärkesteller	Rocker Switch	Rocker Switch	●
Programmschalter	Rocker Switch	Rocker Switch	○

● Standard
○ Optional
Die Gerätegröße von IdO-Hörsystemen ist abhängig von den gewählten Ausstattungsoptionen.
Messdaten nach DIN EN 60118-7:2005(2 ccm); Änderungen vorbehalten.

HÖRSYSTEME Optionen

•• Anpassoptionen

Höchste Flexibilität bei der Anpassung
Um Ihnen höchste Flexibilität zu bieten, können Sie unter zahlreichen Anpassoptionen wählen.

RITE-Optionen


Verschiedene Domes


Power Sleeve



HdO-Optionen


Otoplastik


Easy Thin Tube


Power Mold



•• Farboptionen

Breite Auswahl an Farben
Ihre Kunden haben individuelle Wünsche. Mit unserer breiten Farbpalette, passend zu unterschiedlichsten Haarfarben und Hauttönen, haben sie bei audifon die freie Wahl.

Lackiert


graphit


arabica


champagner


black


bronze


Unlackiert


anthrazit


nougat


silbergrau


beige

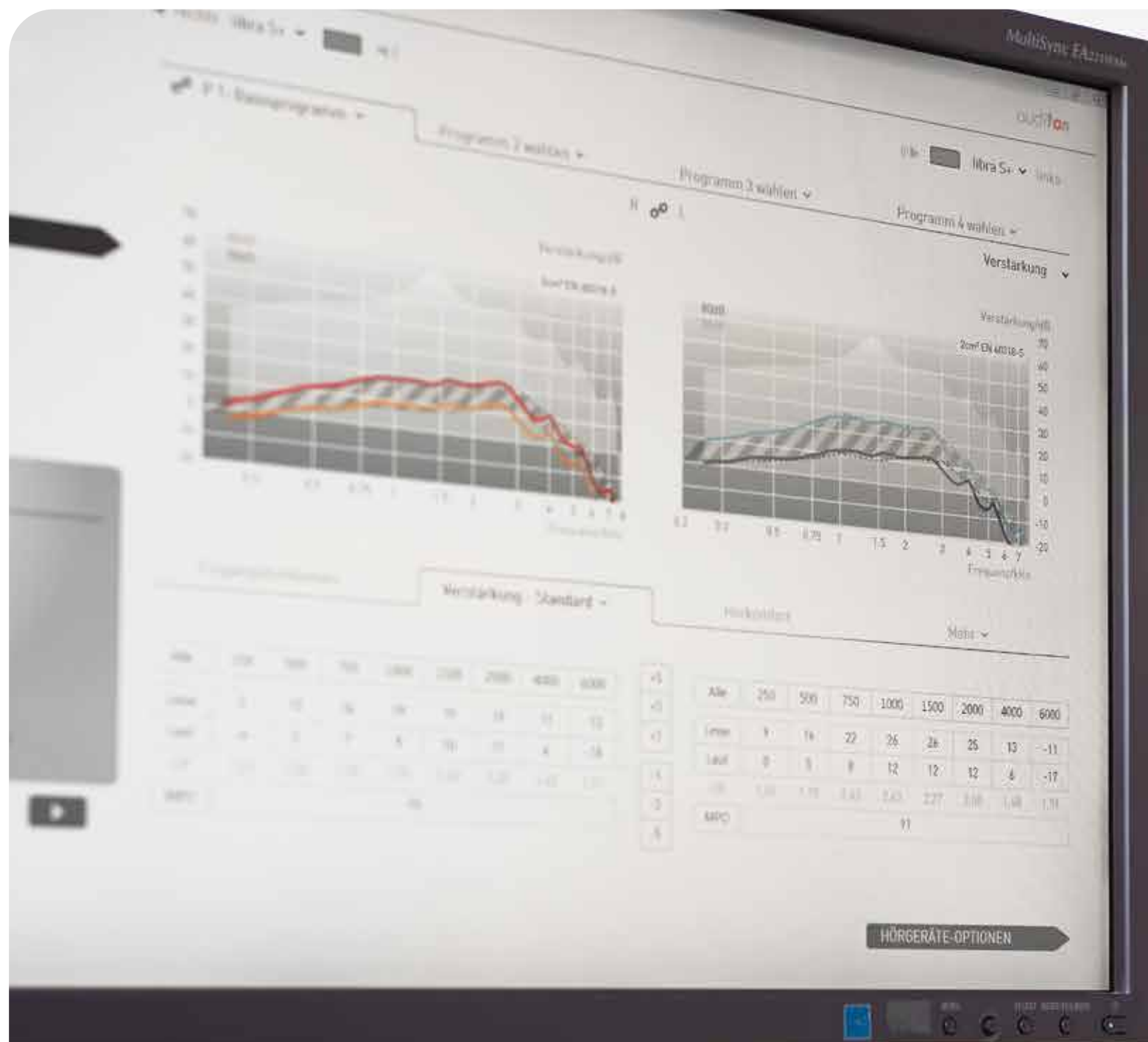

SOFTWARE-SOLUTIONS

•• audifit

audifit 5 überzeugt jeden

Hörakustiker schätzen die intuitive Bedienung und den präzisen First Fit für eine verbesserte Spontanakzeptanz. Die Jury des international bekannten Red Dot Design Awards schätzt die klare und moderne Gestaltung der Software und zeichnete sie in der Kategorie Kommunikationsdesign aus. audifit 5 verbessert Ihre Anpassungen mit diesen wichtigen Funktionen:

- genaueres First Fit-Ergebnis für eine schnellere und zufriedenere Kundenanpassung
- modernes Design und intuitive Bedienung machen die Arbeit mit audifit 5 zum Vergnügen
- aus zwei mach eins: audifit 5 bietet mit MySound! einen schnellen und einfachen Zugang zu realistischen Klangsimulationen „live“ in Ihrem Anpass-Studio
- Kompatibilität mit HiPro/ HiPro 2 und Noahlink sowie Noahlink Wireless



Noahlink Wireless

•• MySound!



Live-Demonstration von Hörsystem-Features mit MySound!

Überzeugen Sie Ihre Kunden: Demonstrieren Sie während der Beratung die neuesten Hörsystemfunktionen und machen Sie sie für Ihre Kunden anhand unterschiedlichster Hörsituationen erlebbar – live in Ihrem Hörstudio! MySound! simuliert realistische Klangwelten, um die Vorteile von Features wie dem einer adaptiven Störgeräusch-unterdrückung, Richtmikrofontechnologie oder verschiedenen Hörprogrammen für den Kunden erfahrbar zu machen.

MySound! ist intuitiv, verfügt über eine umfassende Sammlung an Hintergrund- und Nutzsignalen und wird Ihren Kunden die Entscheidung für ein Hörsystem spürbar erleichtern.



•• ZUBEHÖR

•• Batterien und Pflege

audifon Hörgerätebatterien

Mit quecksilberfreien Zink-Luft-Batterien bietet audifon umweltschonende und langlebige Energieversorgung für moderne Hörsysteme. Verfügbar in allen gängigen Größen.



Trockenstationen audifon dry star UV 2 und dry go

dry star und dry go UV 2 sind beste Lösungen zum schonenden Entzug von Feuchtigkeit aus Hörsystemen und Otoplastiken. So wird die Funktionsfähigkeit von Hörsystemen erhalten und eine lange Lebensdauer erreicht. dry star UV 2 bietet neben der Komforttrocknung den Vorteil der Tiefenreinigung durch UV-Licht, während dry go der ideale Begleiter auf Reisen ist.



Ultraschallbad audifon u-sonic

Schmutz und Cerumen können die Funktion von Ohrstücken, Thin Tubes und Gehörschutz beeinträchtigen. Das Ultraschallbad audifon u-sonic schafft Abhilfe: Mit 46-kHz-Ultraschall sorgt es bereits mit klarem Wasser für hygienische Sauberkeit. Einfach die Sensortaste drücken, alles andere erledigt audifon u-sonic vollautomatisch.



Pflege und Hygiene mit System

audifon pro care ist die komplette Pflegeserie für Hinter dem-Ohr-, Im-Ohr-Hörgeräte, Otoplastiken und individuell angepassten Gehörschutz.



●●

HÖRSYSTEM- FEATURES



HÖRSYSTEM-FEATURES

●● Übersicht Wings-Chip-Plattform

	lewi	risa
Wireless-Features	Wireless-Connectivity 2.4 GHz audifon App multistreamer pro Binaural Synchronisation	Wireless-Connectivity 2.4 GHz audifon App multistreamer pro
Komfort-Features	easyclick Scene Detect (6 Situationen) Adaptive Sound Zoom	easyclick Scene Detect (2) Sprache & Wind Automatic Sound Zoom
Standard-Features	Wind Shield (in Scene Detect) Sound Zoom Adaptive Feedback Guard Adaptive Noise Guard (4 level) Expansion (Squelch) Multi Channel MPO	Wind Shield (in Scene Detect) Sound Zoom Adaptive Feedback Guard Adaptive Noise Guard (2 level) Expansion (Squelch) Multi Channel MPO
Bandbreite und Programme	10k HD Sound 16 WDRC-Channels bis zu 4 Programme	10k HD Sound 12 WDRC-Channels bis zu 4 Programme
Anpassung	Datalogging audifit 5.8	Datalogging audifit 5.8
TRT-/ Kombi-Hörsysteme	Tinnitus-Module*	Tinnitus-Module*
Farb-Option	lackiert/ unlackiert	lackiert/ unlackiert
Versiegelung	Wasserabweisende Beschichtung	Wasserabweisende Beschichtung

* Nicht in allen Märkten verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.

HÖRSYSTEM-FEATURES

•• Übersicht Cosma Plattform

	rega	kami	sino
Komfort-Features	Scene Detect Machine Noise Guard Adaptive Sound Zoom Auto T-Coil/Auto Phone Wind Shield	Adaptive Sound Zoom Auto T-Coil/Auto Phone Wind Shield	
Standard-Features	Sound Zoom Adaptive Feedback Guard Feedback Check Adaptive Noise Guard Expansion (Squelch) Multi Channel MPO	Sound Zoom Adaptive Feedback Guard Feedback Check Adaptive Noise Guard Expansion (Squelch) Multi Channel MPO	Sound Zoom Adaptive Feedback Guard Feedback Check Adaptive Noise Guard Expansion (Squelch) Multi Channel MPO
Bandbreite und Programme	10k HD Sound 18 WDRC-Kanäle bis zu 4 Programme	10k HD Sound 12 WDRC-Kanäle bis zu 4 Programme	10k HD Sound 9 WDRC-Kanäle bis zu 4 Programme
Anpassung	Datalogging Live View ab audifit 5.5	Datalogging Live View ab audifit 5.5	Datalogging Live View ab audifit 5.5
TRT-/Kombi-Hörsysteme	Tinnitus-Modul	Tinnitus-Modul	Tinnitus-Modul
Farb-Option	lackiert/unlackiert	lackiert/unlackiert	unlackiert
Versiegelung	Wasserabweisende Beschichtung	Wasserabweisende Beschichtung	Wasserabweisende Beschichtung

•• Übersicht CROS/BiCROS/TRT

	CROS/BiCROS Solutions via pro	TRT Solutions sueno pro
Wireless-Features	easyclick	
Komfort-Features	Sound Dynamix (SD) AutoPhone Auto T-Coil Adaptive Direktionalität (ADM) sound resync	
Standard-Features	Direktionalität (DM) Adaptive Störgeräuschunterdrückung (ANR) Adaptive Rückkopplungsunterdrückung (AFC²) Expansion (Squelch)	
Bandbreite und Programme	bis zu 4 Programme 8 WDRC-Kanäle 16 Bänder	bis zu 4 Programme 9 Rauschkanäle
Anpassung	Datalogging NAL CROS Anpassalgorithmus audifit 4/audifit 5	audifit 5
TRT-/Kombi-Hörsysteme		Tinnitus-Modul
Farb-Option	lackiert/unlackiert	lackiert/unlackiert
Versiegelung	Wasserabweisende Beschichtung	Wasserabweisende Beschichtung



audifon



Hersteller

audifon GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 2
99625 Kölleda
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590

Fax +49-3635-4056-589

contact@audifon.com

www.audifon.com