

Solutions for better hearing

MySound!

- Live-Demonstration von Hörgeräte-Features
- Interaktives Expertensystem

**voll integriert  
in audifit 5**





**MySound!**

Simulieren Sie Klangwelten live in Ihrem Hörstudio



Erzeugen Sie reale Klangwelten in Ihrem Hörstudio – schnell und einfach. Begeistern Sie Ihre Kunden durch die vielfältigen Möglichkeiten moderner Hörgeräte-Technologie.

Nie war Ihre Beratung verständlicher und überzeugender.



## Der einfachste Weg zur optimalen Anpassung

**MySound!**

Entdecken Sie die umfangreichen Möglichkeiten von MySound! Demonstrieren Sie Hörgeräte-Features live in Ihrem Hörstudio und greifen Sie auf ein interaktives Expertensystem zurück.

### Live-Demonstration von Hörgerätefeatures

Überzeugen Sie Ihre Kunden: Demonstrieren Sie während der Beratung die modernsten Hörgeräte-Funktionen – live in Ihrem Hörstudio!

MySound! simuliert realistische Klangwelten, um Funktionen wie die adaptive Störgeräusch-Unterdrückung, Richtmikrofon-Technologie oder verschiedene Hörprogramme erlebbar zu machen. Sogar der Vorteil einer CROS/BiCROS-Anpassung lässt sich schnell und einfach simulieren.

Machen Sie die Vorteile hochwertiger Hörgeräte-Funktionen direkt in Ihrem Fachgeschäft erlebbar. Ihre Kunden werden begeistert sein!

### Interaktive Feinanpassung und Expertensystem

Die unvergleichbare Flexibilität von MySound! macht es möglich, Dolby Surround Hintergrundgeräusche, wie beispielsweise Straßenlärm oder typische Geräusche im Restaurant, mit verschiedenen Nutzsignalen wie z.B. Unterhaltungen oder Fahrradklingeln zu kombinieren.

So können Sie bequem mit wenigen Klicks mögliche Hörsituationen simulieren, in denen Ihre Kunden Optimierungen ihrer Hörgeräte wünschen.

Auf Basis der Wahrnehmung Ihrer Kunden schlägt das MySound! Expertensystem sinnvolle Möglichkeiten der Hörgeräte-Anpassung vor.



**MySound!**

## Die variablen Hörsimulationen von MySound!

### MySound! Klangwelten

Stellen Sie realistische Klangwelten aus einer Vielzahl von Hintergrundgeräuschen und Nutzschallen zusammen.

### Hintergrundgeräusche

- Restaurant
- Küche
- Mensa
- Büro
- Wald
- Strand
- Kfz-Werkstatt
- Stadion
- Jazz-Konzert
- Straßenverkehr
- Bahnhof
- Autofahrt

### Nutzschalle

- 18 verschiedene Stimmen
- 2 Frauenstimmen  
(jeweils flüsternd/normal/laut)
- 2 Männerstimmen  
(jeweils flüsternd/normal/laut)
- 2 Kinderstimmen  
(jeweils flüsternd/normal/laut)
- 11 verschiedene Dialoge
- 6 Musik-Beispiele
- TV-Nachrichtensprecher
- raschelnde Zeitung
- klingelndes Telefon
- anstoßende Sektkläser
- spielende Kinder
- klingelnde Haustür
- klirrendes Geschirr & Besteck
- WC-Spülung
- zirpende Grillen
- knallende Sektkorken
- brutzelnde Bratpfanne
- surrender Mixer
- heulendes Martinshorn
- läutende Fahrradklingel
- klickender Autoblinder

Positionieren und bewegen Sie den Nutzschall frei in Ihrem Hörstudio.



## Das fortschrittliche Expertensystem

**MySound!**

### Die leichteste Art auf seine Kunden zu hören

Binden Sie Ihre Kunden aktiv ein: MySound! verfügt über ein professionelles Expertensystem, das Sie dabei unterstützt, sofort auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden zu reagieren.


Basierend auf der ausgewählten Klangkulisse macht MySound! die interaktive Feinanzpassung der Hörgeräte möglich, indem Ihre Kunden die jeweilige Hörsituation aktiv be-

werten. Die Ergebnisse können sofort umgesetzt werden. So werden Vorschläge gemacht, die die Einstellungen der Hörgeräte passend zum gewählten Klangbeispiel optimieren.

Dieser innovative Prozess garantiert eine direkte Einbeziehung Ihrer Kunden, eine individuelle Feinanzpassung der Hörgeräte und somit eine hohe Kundenzufriedenheit!

### Drei Schritte für eine erfolgreiche Hörgeräte-Anpassung

- wählen Sie Soundbeispiele aus
- lassen Sie Ihre Kunden z.B. den Klang und die Lautstärke bewerten
- audifonsMySound!-Expertensystem schlägt mögliche Modifikationen vor – und Sie entscheiden über die Anpassung

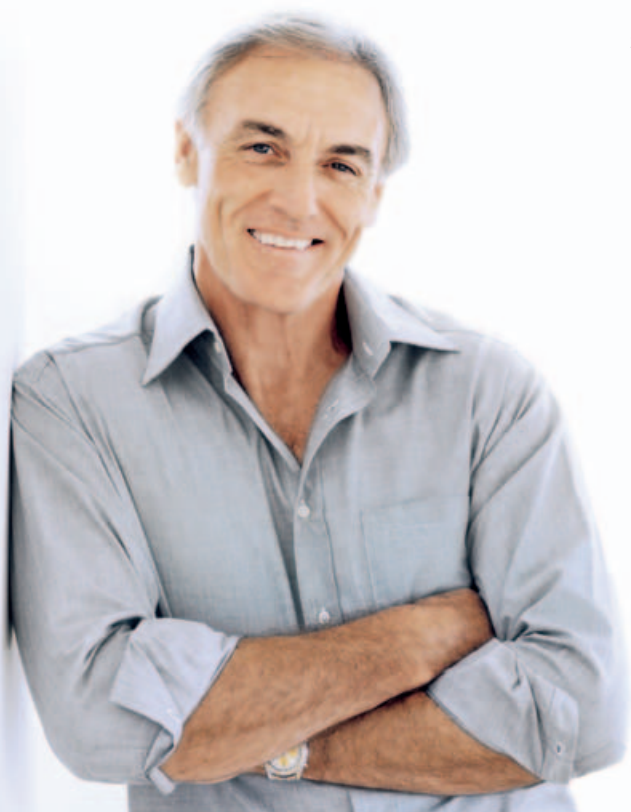



**MySound!**

Einfachste Bedienung für Sie und Ihre Kunden



Kundenansicht



Ihre Programmoberfläche

Ihre Vorteile mit MySound!

#### **Verbesserte Beratung**

- verschiedene Klangbeispiele bieten die Möglichkeit, akustisch wirksame Produkt-Features zu demonstrieren und erlebbar zu machen
- die Beratung ist für den Kunden transparent und besser verständlich

#### **Optimierte Feinanpassung**

- „Baukasten-System“ zur Zusammenstellung typischer Hörsituationen aus Hintergrundgeräusch und Nutzschall
- interaktive Feinanpassung für hohe Kundenzufriedenheit

#### **Einfache Installation**

- alles aus einer Hand zur schnellen und einfachen „Plug & Play“-Installation
- optimal abgestimmtes Lautsprecher-system für kalibrierbare Freifeld-Audiometrie sowie Surround-Sound

#### **Erhöhte Kundenzufriedenheit**

- als Resultat der optimierten Beratung sowie der aktiven Einbindung des Kunden in den Anpassungsprozess steigt die Zufriedenheit Ihrer Kunden merklich

#### **Überwindung von Sprachbarrieren**

- die neueste MySound! Version bietet eine zweisprachige Anpassung der Bildschirm- und Spracheinstellungen für Hörgerätespezialisten und Kunden in Englisch, Deutsch, Spanisch und Polnisch



## Das Komplettpaket **MySound!**

### MySound! Hardware

- MySound! Amp:  
5-Kanal-Verstärker ermöglicht sehr leicht  
das Umschalten zwischen Surround-  
Sound und Freifeld-Audiometrie
- abgestimmte PC-Soundkarte
- Kabel und Dokumentation
- optional:  
5 Lautsprecher, geeignet für Freifeld-  
Audiometrie und die Simulation von  
Surround-Sound

Erleben Sie jetzt die Vorteile von MySound! Gern stehen wir Ihnen mit einem unserer audifon Vertriebspartner zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin oder kontaktieren Sie uns einfach unter:

[www.audifon.com](http://www.audifon.com)



**audifon** Solutions for better hearing

Besuchen Sie [www.audifon.com](http://www.audifon.com) und entdecken Sie unsere Partner-Resources:



**Service Center**

Downloaden Sie die neuesten technischen Informationen zum Thema Service und Wartung der Produkte sowie die aktuellen audifon Software-Versionen.

**Zentrale**

audifon GmbH & Co. KG  
Werner-von-Siemens-Straße 2  
99625 Kölleda  
Deutschland

Telefon +49-3635-4056-590  
Fax +49-3635-4056-589

[contact@audifon.com](mailto:contact@audifon.com)

**USA**

audifon USA Inc.  
403 Chairman Ct., Suite 1  
Debary, Florida 32713  
PO BOX 531700  
USA

Telefon +01-386-668-8812  
Fax +01-386-753-9564

[contact.usa@audifon.com](mailto:contact.usa@audifon.com)

**Asia Pacific**

audifon Asia Pacific Pte Ltd  
260 Orchard Road  
The Heeren #12-09  
Singapore 238855  
Singapore

Telefon +65-62964900  
Fax +65-63922306

[contact.asia@audifon.com](mailto:contact.asia@audifon.com)

[www.audifon.com](http://www.audifon.com)