



●● lewi S

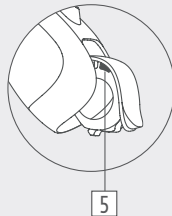


- 2.4 GHz Wireless-Technology
  - 10k HD Sound
  - Scene Detect (6 situaciones)
  - Binaurale Synchronisation
  - easyclick
  - Adaptive Sound Zoom
  - Automatic Sound Zoom
  - Sound Zoom
  - Omni Mic
  - Adaptive Noise Guard (4 etapas)
  - Expansión
  - Wind Shield
  - Adaptive Feedback Guard
  - Feedback Check
  - 16 Canales WDRC
  - Multi Channel MPO
  - Max. 4 programas
  - Conmutador balancín (Rocker switch)
  - Alarma de pila baja
  - Encendido retardado
  - Tinnitus-módulo
  - Data Logging
  - Live View
  - MySound!
  - Capa repelente al agua
- Opciones:**
- audifon App
  - multistreamer pro
  - UniTip Soundshell
  - UniTip ThinTube
  - UniTip Domes
  - clip concha
  - filtro anticerumen

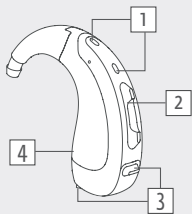

- 1 Entradas de sonido de micrófono
- 2 Interruptor tipo balancín
- 3 Compartimiento de pila/  
Encendido/Apagado
- 4 Placa del fabricante
- 5 Marcador lateral  
(Rojo - Derecho/  
Azul - Izquierda)

Noahlink®  
Wireless

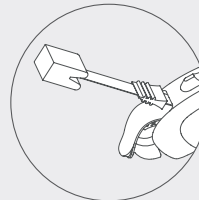

**Progración**

a través de NOAHlink Wireless con  
batería Programación alternativa con  
cable. CS44 y Flex CS54 sin batería

Prog.-Box: NOAHlink Wireless  
NOAHlink  
HI-PRO  
HI-PRO USB



●● lewi S

**Datos técnicos**

**EN 60118-0:2015** (Acoplador 2 cm<sup>3</sup>) & **ANSI S3.22-2014** (Acoplador 2 cm<sup>3</sup>)

<b>Voltaje de funcionamiento</b>	1,30 V
<b>Ganancia acústica (50 dB SPL)</b>	
HFA	60 dB
Valor pico	67 dB
<b>Saturación de salida (90 dB SPL)</b>	
HFA	125 dB SPL
Valor pico	131 dB SPL
<b>Referencia de prueba de ganancia</b>	48 dB
<b>Rango de frecuencia</b>	100 Hz–6700 Hz
<b>Distorsión armónica total</b>	
500/800/1600/3200 Hz	3/2/1/1 %
<b>Nivel de ruido de ingreso</b>	22 dB
<b>Corriente de pila</b>	1,53 mA
<b>Tipo de pila</b>	13
<b>Rendimiento promedio de pila</b>	150 h
<b>Rendimiento promedio with Wireless<sup>1</sup></b>	100 h
<b>Enmascarador de tinnitus<sup>2</sup></b>	
Nivel de ruido (RMS)	107 dB
Rango de frecuencia	200 Hz–8000 Hz


<sup>1</sup> a las 2h de uso diario de funcionalidades de streaming.

<sup>2</sup> Sólo cuando se activa el módulo de tinnitus en audifit.




●● lewi S

Rango de adaptación

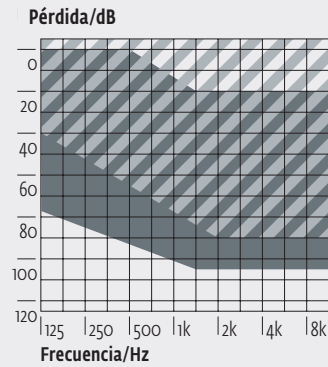

El área sombreada corresponde a lewi S con adaptación abierta y tubo fino.


Ruido en la banda tres octavos

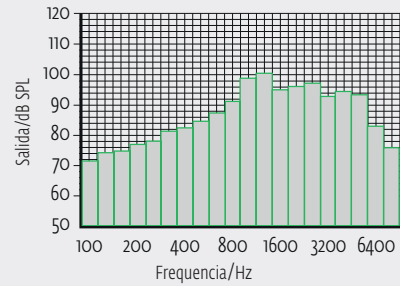


El generador de ruido sólo se activa en el módulo de tinnitus de audifit.

Estas curvas están medidas con el simulador de oído (EN 60318-0:2015) en condiciones de medición.


Nivel de saturación/salida máxima

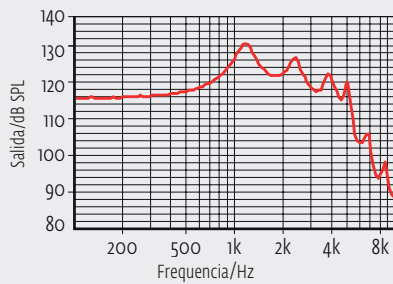

Ganancia

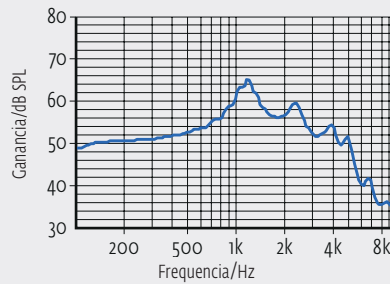

Referencia de prueba de ganancia (RTC)

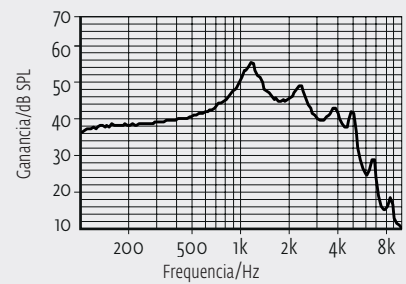

Debido al procesamiento complejo de señales, las mediciones de las curvas presentadas arriba son posibles sólo en una configuración estándar del aparato y con el software actual. Para ver variaciones de otros parámetros se recomienda hacer pruebas con el software.